

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor	Date de publication : 5 avril 2021

Protocole pour la mise en œuvre des tests de dépistage rapide réalisés avec BD Veritor

Mise en application :

Ce protocole s'applique au personnel responsable des stations de dépistage rapide et aux employés, travailleurs auxiliaires, clients ou fournisseurs de CAE qui se soumettent volontairement au test de dépistage rapide de la COVID-19.

Responsable	Actions à prendre	Soutien aux ressources
Sur place		
Agent administratif	<u>Interactions avec les employés, étape par étape :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accueillir l'employé et obtenir son consentement au test. 2. Valider l'identité (prénom et nom) de l'employé. 3. Expliquer la méthode à suivre et remettre l'écouvillon à l'employé. 4. Reprendre l'écouvillon de l'employé une fois l'échantillon collecté. 5. Inscire le nom de l'employé sur le dispositif de test. 6. Expliquer à l'employé que le service médical communiquera avec lui au cours de la prochaine heure si le résultat du test est positif et qu'il ne sera pas avisé si le résultat est négatif. 	Service médical de CAE Montréal

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor	Date de publication : 5 avril 2021

	<p>7. Inviter l'employé à retourner vaquer à ses occupations.</p> <p>8. Désinfecter le siège utilisé par l'employé après son départ.</p> <p><u>Manipulation de l'échantillon</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer le capuchon du tube réactif d'extraction. 2. Insérer l'écouvillon d'échantillon dans le tube réactif. 3. Plonger vigoureusement l'écouvillon de haut en bas pendant 15 secondes. 4. Retirer l'écouvillon tout en appuyant sur le tube pour extraire le liquide. 5. Jeter l'écouvillon dans le récipient à déchets chimiques jaunes. 6. Appuyer fermement la pointe de distribution sur le tube. 7. Mélanger l'échantillon en effleurant ou en faisant tourbillonner le fond du tube. 8. Ajouter 3 gouttes de l'échantillon traité au dispositif de test. 9. Inscrire l'heure exacte. 10. Remettre le dispositif de test au technicien responsable. 	
Technicien	<p><u>Analyse des résultats (marche à suivre pour tous les tests)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laisser le test se développer pendant 15 minutes. 	

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor	Date de publication : 5 avril 2021

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Appuyer sur le bouton bleu lorsque le test est prêt, allumer le BD Veritor Plus Analyzed. 3. Insérer le dispositif de test pour la lecture lorsque vous y êtes autorisé. 4. Le résultat apparaîtra à l'écran. 5. Enregistrer le résultat et retirer le dispositif de test de l'analyseur. 6. Jeter le dispositif de test avec les déchets chimiques jaunes. <p>Dans l'éventualité où un test serait positif à la COVID-19, le technicien appelle immédiatement le Service médical et/ou le directeur médical pour prendre en charge la personne qui a obtenu un résultat positif.</p>	
Mobile		
Agent administratif (clinique mobile)	<u>Interaction avec les employés (mobile)</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accueillir l'employé et obtenir son consentement au test. 2. Valider l'identité (prénom et nom) de l'employé. 3. Expliquer la méthode à suivre et remettre l'écouvillon à l'employé. 4. Reprendre l'écouvillon de l'employé une fois l'échantillon collecté. 5. Inscire le nom de l'employé sur le dispositif de test. 6. Expliquer à l'employé que le service médical communiquera avec lui au cours de la prochaine heure 	

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor	Date de publication : 5 avril 2021

	<p>si le résultat du test est positif et qu'il ne sera pas avisé si le résultat est négatif.</p> <p>7. Inviter l'employé à retourner vaquer à ses occupations.</p> <p><u>Manipulation de l'échantillon</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer le capuchon du tube réactif d'extraction. 2. Insérer l'écouvillon d'échantillon dans le tube réactif. 3. Plonger vigoureusement l'écouvillon de haut en bas pendant 15 secondes. 4. Retirer l'écouvillon tout en appuyant sur le tube pour extraire le liquide. 5. Jeter l'écouvillon dans le récipient à déchets chimiques jaunes. 6. Appuyer fermement la pointe de distribution sur le tube. 7. Mélanger l'échantillon en effleurant ou en faisant tourbillonner le fond du tube. 8. Ajouter 3 gouttes de l'échantillon traité au dispositif de test. 9. Inscrire l'heure exacte. 	
Technicien	<p><u>Analyse des résultats (marche à suivre pour test provenant du dépistage mobile seulement)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajouter 3 gouttes de l'échantillon traité au dispositif de test. 2. Inscrire l'heure exacte. 	<p>Directeur médical Montréal (Danny Samra)</p>

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor	Date de publication :
	5 avril 2021

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Laisser le test se développer pendant 15 minutes. 4. Appuyer sur le bouton bleu lorsque le test est prêt, allumer le BD Veritor Plus Analyzed. 5. Insérer le dispositif de test pour la lecture lorsque vous y êtes autorisé. 6. Le résultat apparaîtra à l'écran. 7. Enregistrer le résultat et retirer le dispositif de test de l'analyseur. 8. Jeter le dispositif de test avec les déchets chimiques jaunes. <p>Dans l'éventualité où un test serait positif à la COVID-19, le technicien appelle immédiatement le Service médical et/ou le directeur médical pour prendre en charge la personne qui a obtenu un résultat positif.</p> <p><u>Enregistrement des résultats</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enregistrer le nom de l'employé et son résultat dans le registre qui se trouve dans Workday. Ceci doit être fait la journée même de l'analyse. <p><u>Rapport pour Santé Canada (résultats de la semaine précédente)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prendre possession du rapport hebdomadaire désidentifié généré chaque lundi matin par l'outil Workday. - Prendre le modèle de rapport désidentifié fourni par Santé Canada et y transférer l'information du rapport provenant de Workday. - S'assurer de valider que le sommaire du rapport correspond à ce qui a été fourni par l'outil Workday 	
--	---	--

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor	Date de publication : 5 avril 2021


	Envoyer chaque lundi avant 14 h le rapport de la semaine dernière au gouvernement fédéral.	
Service médical	<ol style="list-style-type: none"> 1. Communiquer avec le gestionnaire ou le responsable de la personne qui a obtenu un résultat positif à la COVID-19 pour l'isoler. 2. Aviser la sécurité pour retirer les accès de la personne qui a obtenu un résultat positif. 3. Communiquer avec l'employé, lui dire d'aller passer un test PCR COVID-19 et lui indiquer les prochaines étapes. 4. Enregistrer le résultat PCR de l'employé, une fois que ce dernier l'obtient, dans le registre qui se trouve dans Workday. 5. Si le test PCR COVID-19 est négatif, l'employé est autorisé à revenir au travail. 6. Si le test PCR COVID-19 demeure positif, déclencher le plan d'intervention d'urgence COVID-19. 7. Autoriser la personne à retourner dans les installations lorsque la situation répondra aux conditions du plan d'urgence. 	
Gestionnaire/ responsable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informer la personne qui a obtenu un résultat positif et l'isoler. 2. Communiquer avec le Service médical pour connaître les prochaines étapes à suivre. 	

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor

Date de publication :
5 avril 2021

ANNEXE

Comment utiliser l'écouvillon nasal pour le dépistage rapide COVID-19

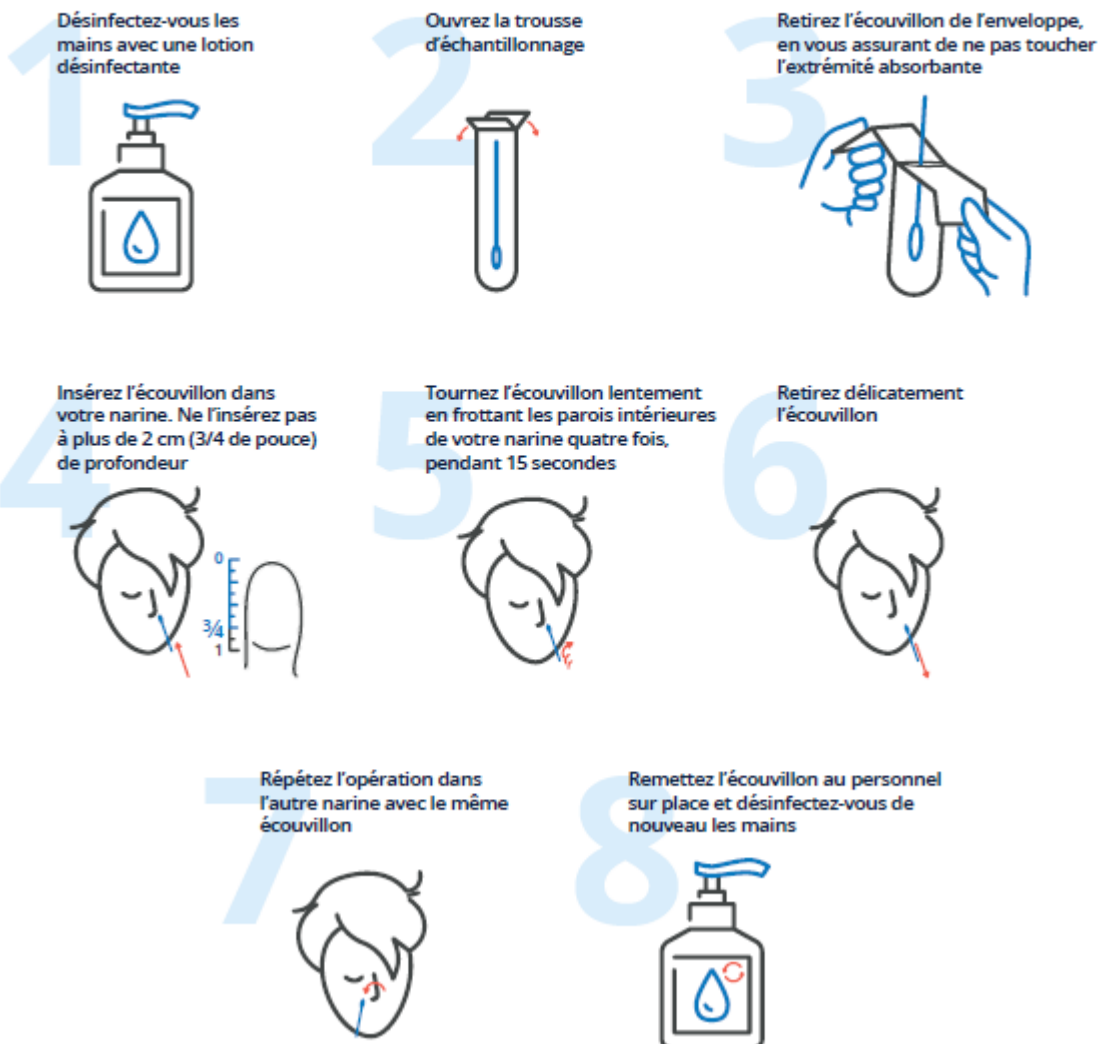

Actions à réaliser dans le cadre des tests de dépistage rapide en entreprise avec BD Veritor

Date de publication :
5 avril 2021

CONTRÔLE DES DOCUMENTS

Renseignements détaillés sur le contrôle des documents

Responsable	Danny Samra
Approbation d'un membre de la haute direction	
Équipe principale d'approbation COVID-19	Pietro D'Ulisse Jennyfer Valme Hugo Christiansen Caroline Veillette